



PACIENTE NÃO INVASIVO

CIRCUITOS E ACESSÓRIOS

TODOS OS CIRCUITOS E ACESSÓRIOS SÃO ADEQUADOS TANTO PARA USO ADULTO QUANTO PARA USO PEDIÁTRICO.

Não invasivo

Conectada ao paciente por meio de interfaces oronasais e nasais.




MÁSCARA NASAL VENTILADA



MÁSCARA ORONASAL VENTILADA



TRAQUEIA SIMPLES

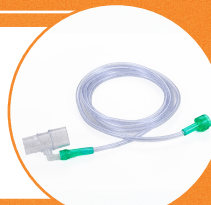

EXTENSÃO DE OXIGÊNIO
Utilizado apenas se necessário

INTERFACE NÃO VENTILADA



FILTRO BACTERIOLÓGICO
Opcional - deve ser conectado proximal ao equipamento

FIXADOR DA MÁSCARA



MÁSCARA COM BORDA INFLÁVEL



VÁLVULA EXALATÓRIA
Utilizada apenas em máscara não ventilada

LEAK PORT



SIMPLE PORT



WHISPER SWIVEL II



Umidificação



FILTRO HME
Substitui a base aquecida com câmara de água



BASE AQUECIDA COM CÂMARA DE ÁGUA

TRAQUEIA 60 ou 70cm
Para conectar o equipamento à base aquecida

