

NUTRIÇÃO ENTERAL






Soluções para o Atendimento Domiciliar



O VitalAire é a marca internacional da Air Liquide Healthcare dedicada ao atendimento domiciliar, oferecendo suporte no tratamento de distúrbios do sono, oxigenoterapia, ventilação mecânica e nutrição enteral.

Proporcionamos conforto e qualidade de vida aos pacientes na continuidade do tratamento de doenças crônicas em casa, assegurando a distribuição de gases medicinais e disponibilizando equipamentos modernos.

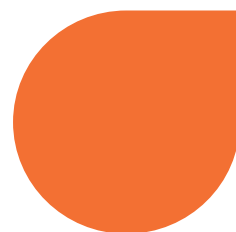

SAIBA MAIS:

 [vitalaire_brasil](#)

 [VitalAireBrasil](#)

[br.vitalaire.com](#)

ÍNDICE

VITALAIRE	02
NUTRIÇÃO ENTERAL	04
EQUIPOS	06
SONDAS	08
HIGIENIZAÇÃO	10
ORIENTAÇÕES	11
PARA SUA SEGURANÇA	12
ANOTAÇÕES	15

Exija a identificação de nosso pessoal, que estará devidamente qualificado, treinado e uniformizado para esclarecer todas as suas dúvidas.



NUTRIÇÃO ENTERAL

Indicações, Métodos e Uso de Bombas Enterais para Terapia Nutricional

Equipo duplo (dieta enteral e hidratação).
Imagem ilustrativa.



É um tipo de tratamento indicado para pessoas que não podem ou não conseguem se alimentar pela boca, mas têm o sistema digestivo preservado ou parcialmente preservado. Essas pessoas recebem a dieta em forma líquida por meio de sonda nasogástrica (pelo nariz até o estômago), nasoentérica (pelo nariz

até o intestino delgado) ou acoplada diretamente ao abdômen (gastrostomia e jejunostomia). Por isso, o composto líquido a ser administrado deve conter todos os nutrientes, como carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água, que normalmente são obtidos por via oral, sendo necessário o controle da qualidade e quantidade ingerida.

IMPORTANTE:

O atendimento do VitalAire inclui o fornecimento da bomba enteral e a quantidade mensal de equipos estipulada em contrato; o fornecimento da dieta enteral ou do frasco da dieta fica a critério do serviço de atendimento domiciliar.

Bomba enteral


São dispositivos que através de uma programação administram a alimentação de forma automática, garantindo segurança e maior controle da terapia nutricional.

As bombas enterais possuem bateria, são bivolt automático e são exclusivas para alimentação enteral.

EQUIPOS

Tipos de conexões: Cruz x Lanceta

Tipos de equipos

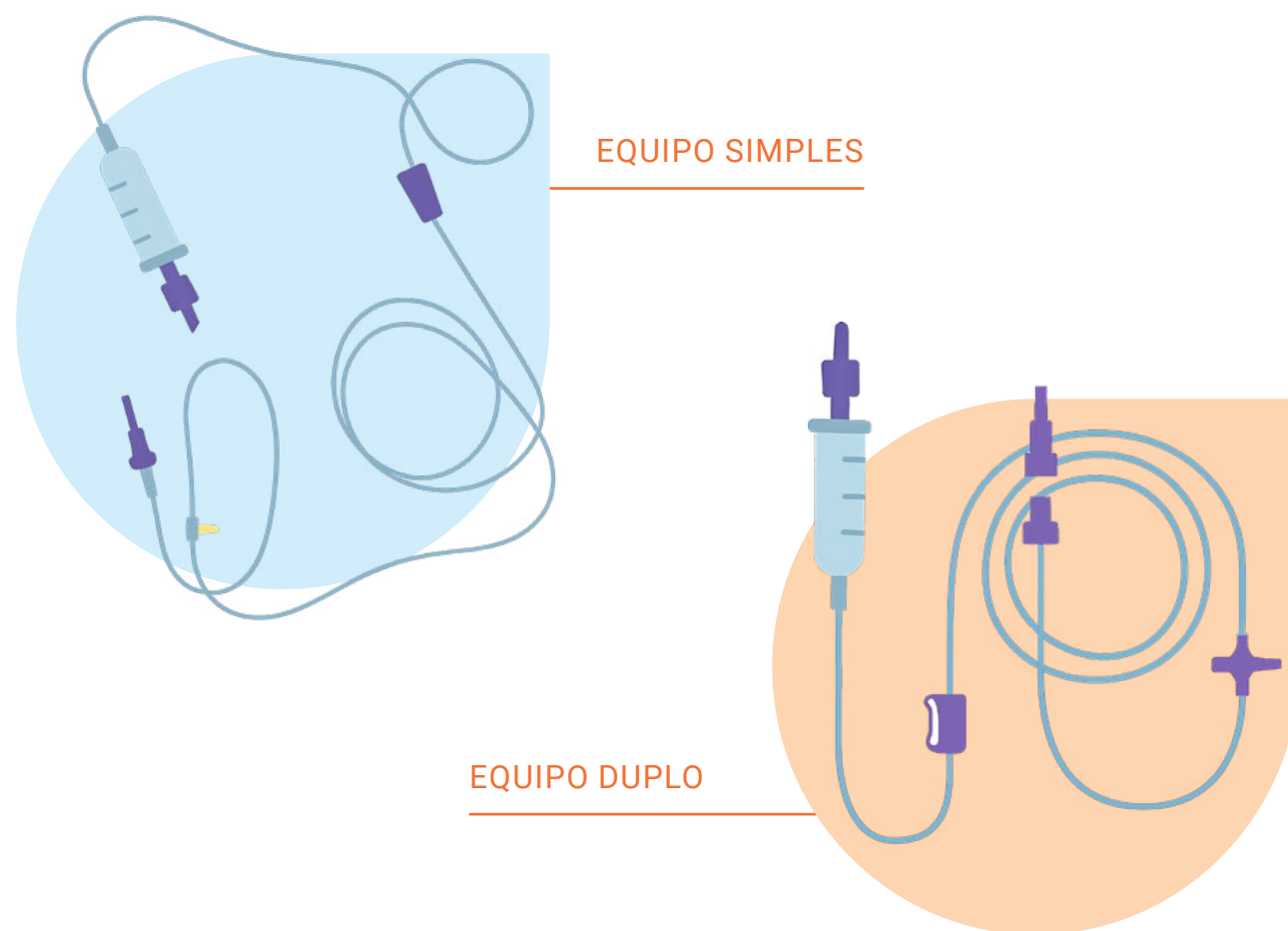

EXISTEM EQUIPOS E SONDAS COM CONEXÃO EM CRUZ E LANCETA

A conexão em cruz é uma conexão mais segura, além do formato em cruz e cor roxa, ela só se conecta em conexão de igual configuração, garantindo segurança e evitando possíveis erros de administração de dietas que podem ser fatais se não administrados da forma correta.

Os equipos fornecidos pelo VitalAire possuem o design do conector de acordo com a ISO 80369-3, sendo conhecido pelo nome da marca comercial registrada internacionalmente de ENFit® - no formato em CRUZ. Seguimos a orientação da Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) que especifica designs de conectores de pequeno diâmetro para reduzir a probabilidade de erros de conexões de tubos.

No mercado brasileiro ainda existem sondas que não possuem conexão ENFit®, sendo necessário o uso de um conector para adaptação no equipo em CRUZ.



SONDAS

TIPOS DE SONDAS

CURTA PERMANÊNCIA

Até 4 semanas

- Sondas naso/oro enterais
- Sondas nasojejunais

A troca das sondas deve ser realizada conforme o protocolo estabelecido pelo serviço de assistência médica responsável pelo paciente.


Fique atento para que não haja obstrução na sonda do paciente.



LONGA PERMANÊNCIA

Mais de 4 semanas

- Gastrostomias
- Jejunostomia

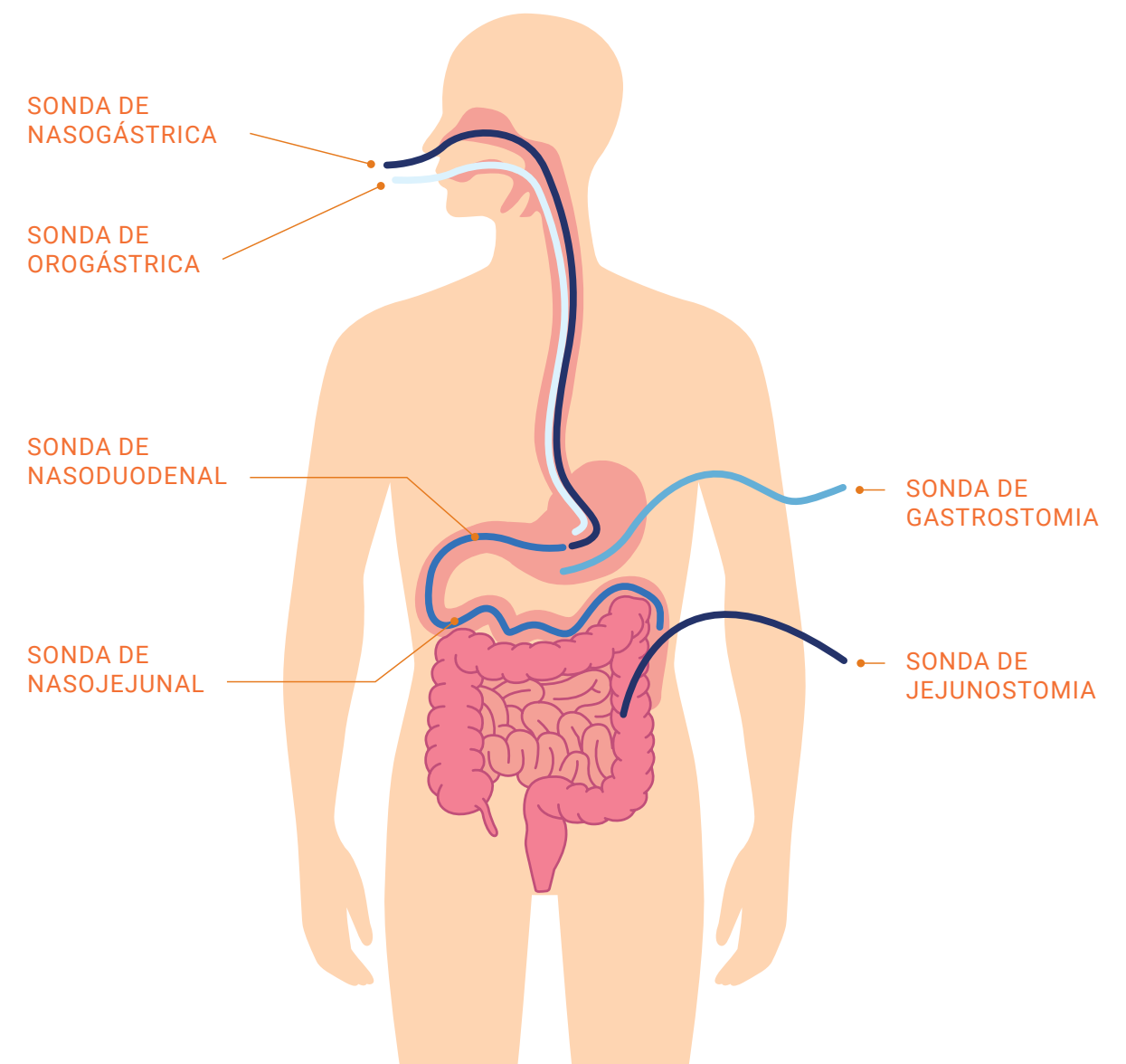

HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE EQUIPOS

ORIENTAÇÕES INSTALAÇÃO DA BOMBA ENTERAL




BOMBA ENTERAL

Limpe a parte externa do equipamento com pano seco ou, se necessário, com pano umedecido em uma solução não abrasiva, que não contenha álcool, cloro ou solvente. Nunca pulverize líquido diretamente sobre a bomba.

EQUIPOS



Recomenda-se a troca diária ou conforme estabelecido no protocolo do serviço de atendimento domiciliar do paciente.

INSTALAÇÃO DA BOMBA ENTERAL

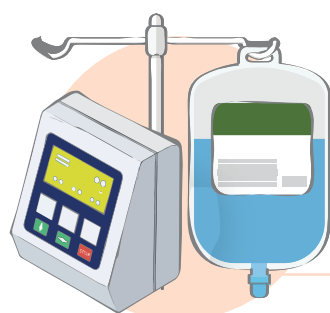


A bomba deve ser instalada na residência com o suporte de soro devidamente fixado na altura ideal para o ajuste dos parâmetros.

Conecte o equipamento (bivolt) à tomada.

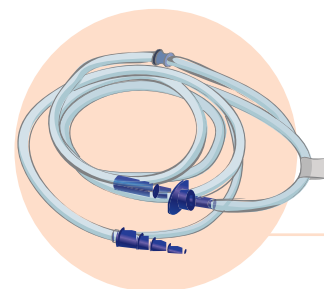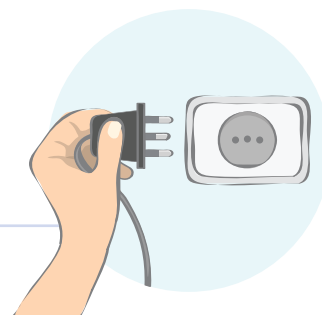

Instale o equipo selecionado conforme as instruções do fabricante da bomba e conecte-o à dieta enteral.

Ligue o equipamento e faça a parametrização de acordo com a prescrição médica, seguindo o passo a passo estabelecido no manual ou guia do fabricante.

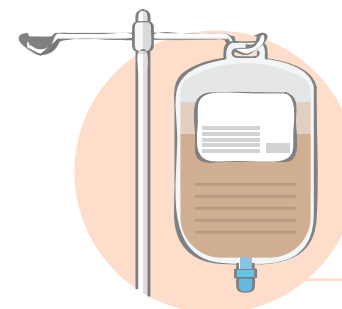

Após o preenchimento do equipo para retirar o ar do sistema, conecte-o à sonda do paciente e inicie a dieta.

Para retirar o equipo, certifique-se de que a bomba esteja desligada. Recomenda-se monitorar o nível de carga da bateria interna na tela, assegurando que o dispositivo seja mantido com a carga completa.



PARA SUA SEGURANÇA



CUIDADOS COM OS EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO FÍSICO



Sempre desligue a bomba antes de retirar o equipo.



Para a administração de medicamentos via sonda, não se esqueça de ocluir o equipo da dieta por meio de pinçamento no momento da administração do medicamento.



Mantenha a bomba fixa no pedestal para prevenir riscos de queda.



Utilize somente a dieta prescrita pelo serviço de atendimento domiciliar do paciente.



A bomba não pode ficar exposta à luz solar direta.

REPAROS, INSTALAÇÕES E ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS CLÍNICOS



O manuseio do equipamento só pode ser realizado por profissional de saúde habilitado. Os parâmetros não podem ser alterados sem a concordância formal do responsável pela prescrição.



A Air Liquide proíbe a realização de manutenções e reparos nos equipamentos por parte do cliente/usuário.



Em caso de problemas ou dúvidas adicionais, entre em contato com o Call Center (0800 555 0322).



Central de Atendimento 24h: 0800 555 0322 | Site: br.vitalaire.com

ANOTAÇÕES

[illegible]



VitalAire™

CENTRAL DE
ATENDIMENTO 24H

0800 555 0322

BR.VITALAIRE.COM



A Air Liquide Healthcare é um líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. Estamos no ambiente hospitalar com soluções em gases medicinais e terapêuticos, equipamentos médicos de alta tecnologia, instalações e serviços.