

VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA - VNI

MANUAL DE UTILIZAÇÃO





Soluções para o Atendimento Domiciliar



O VitalAire é a marca internacional da Air Liquide Healthcare dedicada ao atendimento domiciliar, oferecendo suporte no tratamento de distúrbios do sono, oxigenoterapia, ventilação mecânica e nutrição enteral.

Proporcionamos conforto e qualidade de vida aos pacientes na continuidade do tratamento de doenças crônicas em casa, assegurando a distribuição de gases medicinais e disponibilizando equipamentos modernos.

É proibido fumar próximo aos equipamentos de ventilação.

Riscos associados:



Queimaduras



Incêndio no ambiente ou na residência



Explosão



SAIBA MAIS:



vitalaire_brasil



VitalAireBrasil

br.vitalaire.com

ÍNDICE

VITALAIRE	02
ENTENDENDO A VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)	04
HIGIENIZAÇÃO	06
CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO	08
ANOTAÇÕES	11

Exija a identificação de nosso pessoal, que estará devidamente qualificado, treinado e uniformizado para esclarecer todas as suas dúvidas.



Entendendo a Ventilação Não Invasiva (VNI)



IMPORTANTE:

O modelo ideal será indicado pelo seu médico.

A ventilação mecânica é um suporte ventilatório com pressão positiva aplicada por um equipamento.

Pode ser realizado de forma invasiva ou não invasiva - VNI, a depender da interface (meio que comunica paciente ao dispositivo).

A VNI pode ser utilizada com interfaces facial, nasal ou bucal, através dos equipamentos CPAP ou BiPAP.

O que é o CPAP?

O CPAP é um aparelho que ajuda no tratamento da apneia obstrutiva do sono, mantendo as vias respiratórias abertas durante o sono.

Existem três tipos:

- Pressão fixa
- Pressão fixa com alívio respiratório
- Pressão automática

Já o Binível (BiPAP) é usado no tratamento de doenças respiratórias mais complexas, como:

- Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
- Doenças neuromusculares
- Síndrome da hipoventilação da obesidade
- Casos graves de apneia do sono




Importante:

CPAP e BIPAP não são equipamentos de suporte à vida. Eles podem parar de funcionar em caso de queda de energia ou defeitos. Ou seja: nunca os utilize em pacientes que dependem de ventilação contínua, sem supervisão médica.


ACESSÓRIOS

APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA

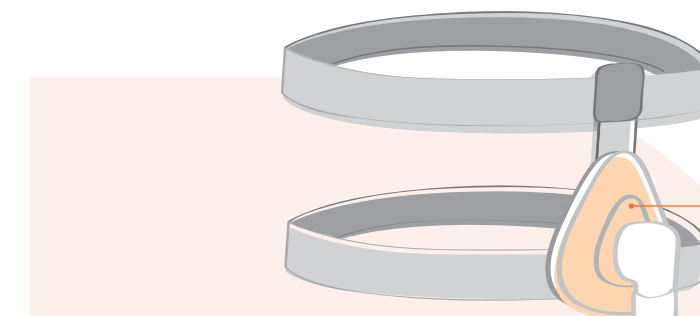

INTERFACES:

- NASAL
- FACIAL
- INTRANASAL OU PILLOW
- PEÇA BUCAL

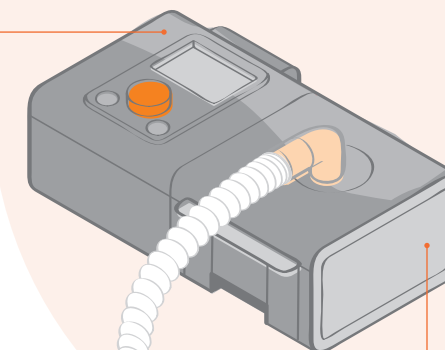

UMIDIFICADOR

CIRCUITO TRAQUEIA

ATENÇÃO:

A escolha deve ser feita por um médico ou fisioterapeuta, pensando no seu conforto e eficácia do tratamento.


HIGIENIZAÇÃO



IMPORTANTE:

A higienização é importante para manter o equipamento limpo e em bom estado.

Veja como higienizar cada item utilizado na terapia.

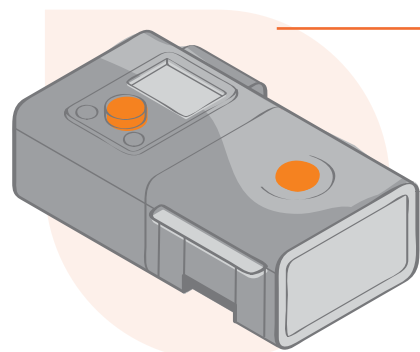


APARELHO (CPAP OU BiPAP)

- Limpe com pano seco ou levemente umedecido
- Use produtos neutros (sem álcool, solventes ou cloro)
- Nunca borrife líquidos diretamente no aparelho



INTERFACES

- Lave 1 vez por semana com água e sabão neutro
- Não use álcool, vinagre ou água oxigenada
- Seque à sombra, em local arejado
- Seguir as orientações do fabricante

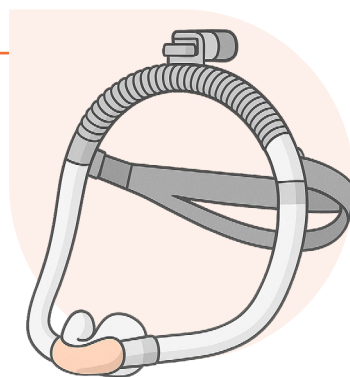

TRAQUEIA

- Lave 1 vez por mês com água e detergente neutro
- Seque à sombra

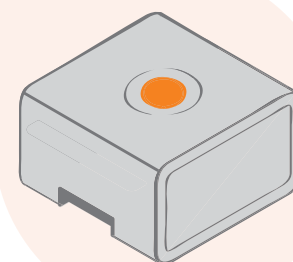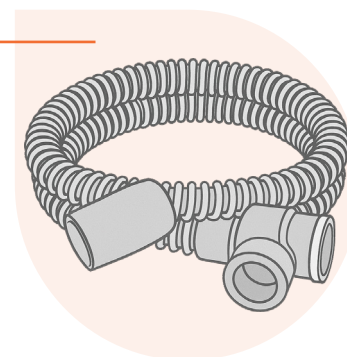


UMIDIFICADOR


- A água do umidificador deve ser trocada todos os dias, sendo fervida, filtrada ou destilada, e mantida à temperatura ambiente
- Lave 1 vez por semana com água e sabão
- A cada 15 dias, use vinagre de álcool + água (10 min), depois enxágue bem

FILTROS

- Os filtros servem para reter as partículas de sujeiras do ambiente para a parte interna do equipamento e a manutenção da higienização e/ou troca é fundamental para o correto funcionamento do mesmo.
- Seguir com a orientação de acordo com o fabricante ou contratante.

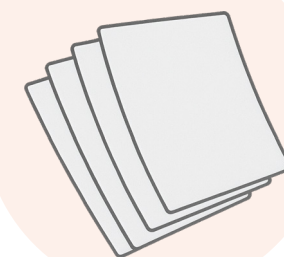

PARA SUA SEGURANÇA

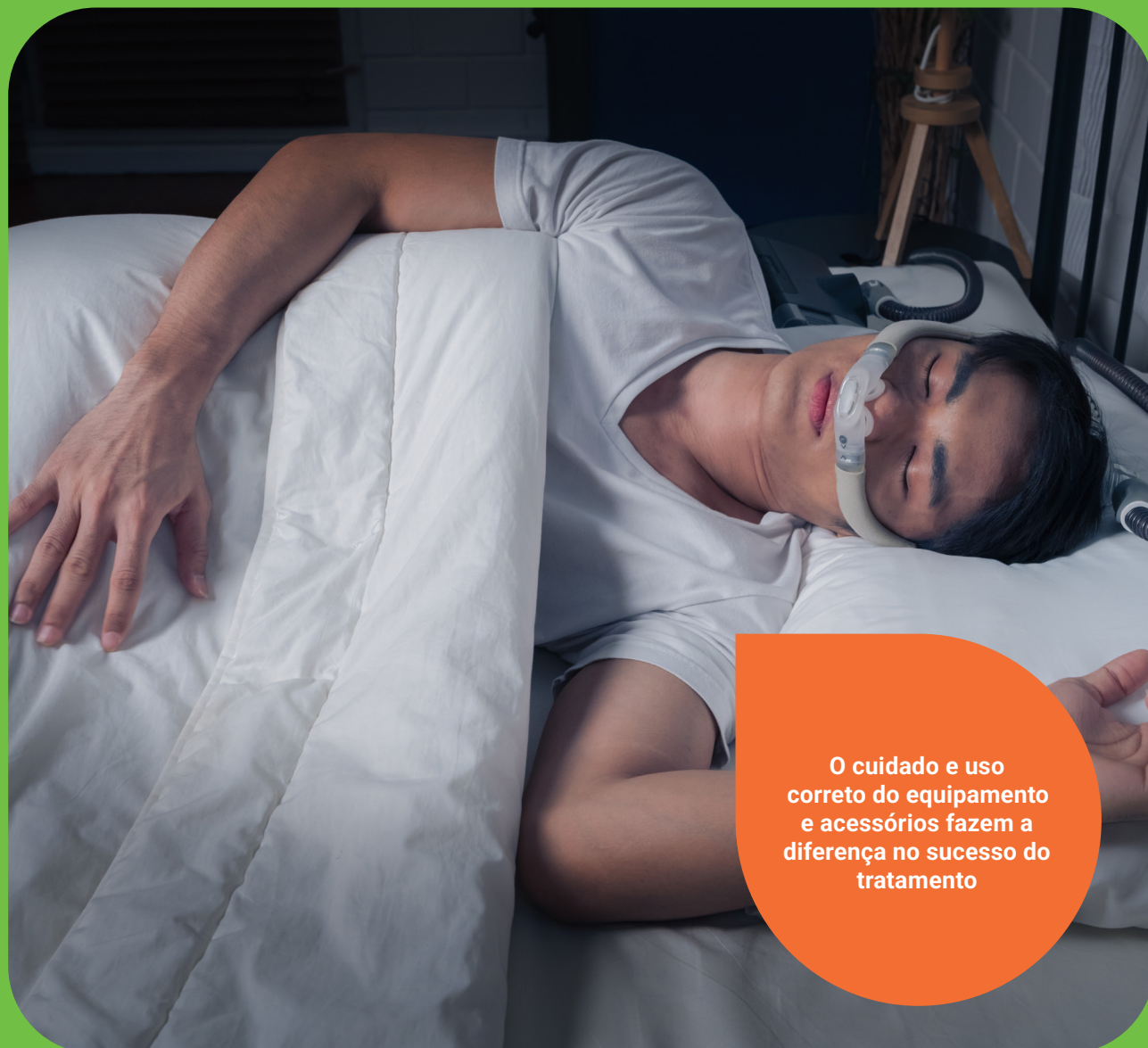

PARA O USO DO CPAP E BIPAP SE FAZ
NECESSÁRIO A PRESCRIÇÃO MÉDICA.



CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO



Em caso de falha elétrica, retire a máscara imediatamente



Mantenha líquidos afastados do aparelho



Posicione o equipamento em local plano e estável



Ao transportar o equipamento, sempre retirar a água da
câmera interna do umidificador.



Use apenas água filtrada, destilada ou fervida (em
temperatura ambiente) no umidificador



Nunca use soro ou medicamentos no umidificador



Evite exposição direta ao sol



Não altere configurações sem orientação médica



Jamais realize manutenções ou reparos por conta própria



Não obstrua entradas ou saídas de ar



Se ouvir ruído de vazamento, verifique se a máscara está bem encaixada



A máscara deve estar firme, mas sem deixar marcas no rosto



Se usar umidificador, posicione o aparelho abaixo da altura da cabeceira



Nunca ligue o umidificador sem água



Ajuste a umidificação conforme seu conforto e orientação do profissional de saúde



Em locais muito frios, pode ocorrer condensação na traqueia. Converse com o VitalAire sobre a opção de uso da traqueia aquecida



Os aparelhos do VitalAire são bivolt



Use o aparelho conforme a prescrição médica



Se for viajar, leve o equipamento em mala apropriada



NÃO TRANSPORTE O EQUIPAMENTO COM ÁGUA NO UMIDIFICADOR.



ATENÇÃO:

O equipamento é de uso exclusivo e não pode ser transferido ou compartilhado com outra pessoa. A configuração é específica para o paciente em uso.



Para acessar o **Tutorial de Uso dos Equipamentos VitalAire** escaneie o QRCode abaixo:

Cuidar bem do seu equipamento é cuidar melhor da sua saúde.

Quando você segue as orientações, garante mais conforto, mais segurança e melhores resultados para a sua saúde.

Lembre-se: você não está sozinho nessa jornada. A equipe da Air Liquide | VitalAire está sempre à disposição para te orientar e tirar dúvidas, sempre que precisar.

Em caso de qualquer dificuldade ou dúvida:

Central de Atendimento 24h: 0800 555 0322 | Site: br.vitalaire.com



ANOTAÇÕES



CENTRAL DE
ATENDIMENTO 24H

0800 555 0322

BR.VITALAIRE.COM

